


Инструкция по применению Целлюлесс МД
Красота и укрепление тела

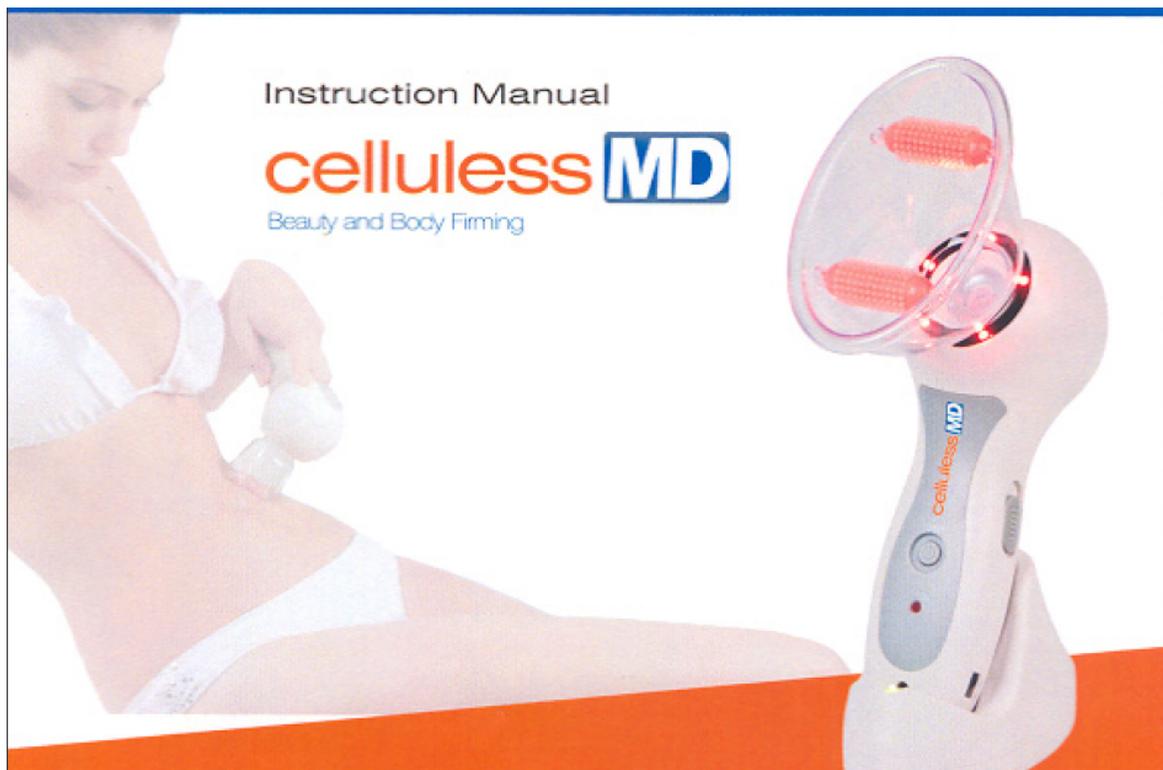

О Целлюлесс МД

Целлюлесс МД предлагает женщинам различных культур именно то, что они хотят: естественный высокоэффективный косметический уход, не только нежный, но и качественный. Этот аппарат все-в-одном может быть использован на теле для приведения кожи в тонус и устранения признаков старения. Валковые головки Целлюлесс МД стимулируют кожу, восстанавливают естественное функционирование тела.

Целлюлесс МД очень прост в использовании; при строгом соблюдении инструкций по применению Ваш Целлюлесс МД вскоре станет частью регулярного ухода за Вашей новой кожей. Используйте Целлюлесс МД в течение нескольких минут для достижения мгновенных блестящих результатов.

Массаж зон тела в течение 5-10 минут в день – это наиболее экономичный и эффективный способ для восстановления тонуса и гладкости.

Характеристики:

- Портативный, легкий в использовании.
- Идеально подходит для рук, живота, спины, бедер, ягодиц и ног.
- Сменные чашки с роликами.
- Регулируемая вакуумная система для глубокого массажа.
- Укрепление мышц и снятие напряжения.

Преимущества:

- Заметное разглаживание кожи.
- Снижение веса, разглаживание и придание формы тела.
- Блестящий, ровный цвет и состояние кожи.
- Отсутствие побочных эффектов, какие присутствуют после операции и инъекций.
- Помощь в улучшении и укреплении дряблой кожи.

Компоненты Целлюлесс МД:

1 эргономичный прибор Целлюлесс МД (А)

1 эргономичная чашка Дуал роллер (В)

1 эргономичная чашка Сингл роллер (С)

1 АС/DC адаптер 110В / 220В (ограничение использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании) (D)

1 база Организатор/Зарядное устройство Целлюлесс МД (Е)

1 руководство по эксплуатации на английском и испанском языках

1 элитная программа питания Целлюлесс МД



Предлагаемые зоны применения:



Меры предосторожности

Проконсультируйтесь с Вашим врачом перед использованием массажера, если Вы болеете, проходите лечение или беременны.

Этот прибор не является медицинским, и предназначен только для массажа.

- Медицинские свойства предполагаются или гарантируются при использовании данного продукта.

Убедитесь в том, что прибор выключен перед отключением его от сети.

Рекомендуется начинать массаж с низкой скорости/интенсивности на начальной стадии, затем постепенно увеличивать скорость/интенсивность по необходимости.

Не массируйте отдельную зону более 10 минут.

Не оставляйте продукт в местах, доступных для детей.

Не используйте прибор в зоне варикозного расширения вен, родинок или на участках с поврежденной кожей.

Не используйте в зоне заметных недавних шрамов.

Избегайте области вокруг пуповины. Если Ваш живот твердый и горячий не используйте прибор и проконсультируйтесь со своим терапевтом.

Вы можете заметить покраснение кожи в зоне обработки – это нормальное явление, и оно временно.

Если Ваш Целлюлесс МД неисправен, не пытайтесь открыть его или отремонтировать. Ремонт может быть произведен только производителем или уполномоченным дистрибьютором.

ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИЦАМ, НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ИЛИ КОРМЯЩИМ МАТЕРЯМ. Также как и с любым массажным прибором, людям с индивидуальными заболеваниями необходимо проконсультироваться с терапевтами перед использованием прибора.

Эксплуатация и хранение:

Всегда отключайте прибор от сети, если не используете его.

Используйте и заряжайте прибор только при помощи прилагаемого адаптера.

Избегайте контакта Целлюлесс МД с водой.

Необходимо чистить чашки и прибор после каждого применения.

Целлюлесс МД: политика возврата

Данный продукт имеет гарантию производителя. Мы принимаем возврат только неоткрытого и неиспользованного Целлюлесс МД в течение 30 дней после покупки. В случае повреждения герметичной упаковки Целлюлесс МД не может быть возвращен. Картонная упаковка должна быть в исходном состоянии, не искаженной.

ВНИМАНИЕ:

Проконсультируйтесь с врачом перед использованием продукта. Внимательно прочтите инструкцию. Используйте продукт лишь в целях, описанных в инструкции. Данный продукт не предназначен для замены профессиональной медицинской рекомендации, диагноза или лечения. Используйте данный продукт на Ваш собственный риск. Производитель и дистрибьютор не несут никакой ответственности

за использование данного продукта. Тщательное наблюдение необходимо при использовании продукта рядом с детьми или лицами с ограниченными возможностями. Не используйте данный продукт при ощущении боли или если Вы беременны. Не массируйте части тела, на которых есть вздутия, раздражения или кожная сыпь.

Все гарантии, как выраженные, так и подразумеваемые, или коммерческая пригодность, или пригодность для конкретных целей не признаются, производитель или дистрибьютор не несут ответственность за любые нарушения, возникающие в результате использования данного продукта, включая, но, не ограничиваясь прямыми, косвенными, случайными, дисциплинарными и последовательными нарушениями. Максимальная ответственность производителя или дистрибьютора перед Вами, и Ваше эксклюзивное право по использованию данного продукта – это сумма, уплаченная Вами производителю или дистрибьютору.

Технология массажа

Для каждой зоны массажа: обязательно ознакомьтесь с Целлюлесс МД, не забывайте всегда массировать по направлению к сердцу, после каждого массажного движения вверх (нажимайте кнопку интенсивности) и приступайте к следующему движению.

Вам необходимо настроить и ознакомиться с уровнем скорости всасывания, и настроить подходящую для Вас скорость.

Если Вы хотите обработать несколько частей тела, всегда начинайте с верхней части желаемой зоны обработки, и следуйте сверху вниз. Используйте прибор, соблюдая правильное направление, и в соответствии с обозначенным временем ежедневно до получения желаемого результата. После этого Вы можете использовать прибор каждую неделю для поддержания стройности в дюймах.

Не применять прибор непосредственно в зоне варикозного расширения вен, или минимум в течение 2 месяцев после операции на вены. Наслаждайтесь лечением настолько часто, насколько это необходимо. Для поддержания желаемого результата в ногах используйте прибор минимум один раз в месяц.



Спина: время массажа 5-8 минут

Бедра: время массажа 5-8 минут

Ягодицы: время массажа 5-8 минут



Руки: время массажа 5-8 минут

Живот: время массажа 5-8 минут

Ноги: время массажа 5-8 минут