

# *Physiotecnica*

производство водолечебного оборудования



## СИСТЕМА ПОДВОДНОГО ГИДРО-ВАКУУМНОГО МАССАЖА



## СИСТЕМА ПОДВОДНОГО ГИДРО-ВАКУУМНОГО МАССАЖА

ГИДРО-ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ – ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД БАЛЬНЕОТЕРАПИИ, АКТИВНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ И МИРЕ. В ОСНОВЕ МЕТОДА ЛЕЖИТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВАКУУМОМ НА ТКАНИ ТЕЛА ПОД ВОДОЙ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ НАСАДКИ.

Подводная гидро-вакуумная система работает только в паре с опцией ПДМ (подводный душ-массаж). Возможность комбинации гидро-вакуумного и обычного подводного душ-массажа в одной ванне значительно расширяют функциональные характеристики оборудования. По своей эффективности и комфорту эта процедура превосходит все аппаратные методы по восстановлению, как самой кожи, так и её плотности, по снижению веса и коррекции целлюлита, по воздействию на биологически активные точки, восстанавливая механизмы саморегулирования, ускоряя процессы обновления в организме.




Производимая и запатентованная компанией «Физиотехника» система гидро-вакуумного массажа, адаптирована для использования на ваннах Гольфстрим, а также Ладога, Оккервиль, Атланта, Хаббарда и опционально входит в комплект поставки гидромассажной установки Аквазир, предназначенной для проведения процедур в необорудованных ваннах и мини бассейнах.

Во время проведения подводного вакуумного массажа пациент размещается в ванне с водой комфортной температуры. В зависимости от чувствительности кожи и индивидуальных особенностей организма подбирается оптимальное давление. Как и при классических аппаратных методах лечения, в зависимости от показаний, процедура вакуум-массажа может быть общей или локальной - направленной на работу с определенной зоной.



### Показания к применению подводного гидро-вакуумного массажа в лечебно-профилакти- ческих целях:

- » с целью повышение тургора и эластичности кожных покровов, коррекции фигуры;
- » для физического расслабления, улучшения сна, умственного расслабления, снятия стресса;
- » в комплексном лечении заболеваний дыхательной, периферической и центральной нервной систем;
- » при нарушенном обмене веществ, ожирении;
- » как реабилитация после пластических операций, детоксикации;
- » для улучшения кровообращения в поверхностных и глубоких слоях кожи и подлежащих мышцах;
- » для восстановления при высоких физических и психических нагрузках, в спортивной медицине.

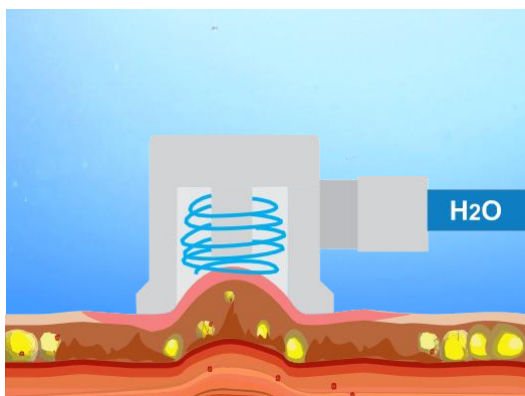

## Как проходит процедура?

Специалист, с помощью вакуумной насадки оказывает последовательное воздействие на зоны ног, бедер, живота, рук и спины.

Во время процедуры происходит равномерное всасывание тканей кожи и подкожно-жирового слоя. Массажист-оператор при этом совершает медленные равномерные движения прижимая насадку непосредственно к телу или располагая ее на небольшом расстоянии. Процедура в зависимости от показаний может занимать по времени от 10-15 до 45 минут и назначается курсом от 5 до 15 процедур. Результат становится заметным уже после 1-го сеанса.

Подводный гидро-вакуумный массаж – это принципиально новая технология комплексного омолаживания кожи, благодаря которой появилась возможность в течение одной процедуры воздействовать как на всю поверхность кожи, так и все слои кожи.

ПОДВОДНЫЙ ДУШ-МАССАЖ ПДМ + ПВМ ПОДВОДНЫЙ ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ

Вакуумная насадка создает комфортное отрицательное давление от 0,1 до 3,5 бар. При необходимости насадка легко заменяется на классическую для подводного душ-массажа. Возможность комбинации гидро-вакуумного и классического подводного душ-массажа в одной ванне значительно расширяют функциональные характеристики оборудования, предоставляя возможность более полного и качественного воздействия как на все группы мышц, так и на подкожно-жировую клетчатку и непосредственно на кожу.

## УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДВОДНОГО ДУШ-МАССАЖА «АКВАЭИР» (ТАНГЕНТОР)

УСТРОЙСТВО ПОДВОДНОГО ГИДРОМАССАЖА ТАНГЕНТОР «АКВАЭИР» ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДВОДНОГО СТРУЕВОГО ДУШ-МАССАЖА В ВАННАХ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА, НЕОБОРУДОВАННЫХ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ ПОДВОДНОГО ДУШ-МАССАЖА.

Тангентор «Акваэир» представляет собой мобильную установку, внутрь которой встроен многоступенчатый насос, используемый в ваннах для подводного массажа. Вся арматура, включая каркас устройства, выполнена из нержавеющей стали. Внешний декоративный корпус изготовлен из высокопрочного стеклопластика, устойчивого к агрессивным средам. На верхней поверхности корпуса располагаются: металлические направляющие для выводов двух шлангов (забирающего воду и подающего (гидро-массажного)), манометр для регулировки давления в гидро-массажном шланге, кран регулировки давления и кнопка включения оборудования. Гидромассажный шланг для проведения подводного душ-массажа оснащен наконечником со съемными струевыми насадками, выполненными из полимерного ударопрочного легкого материала, который не царапает и не повреждает любое покрытие ложа ванны.

В базовую комплектацию к тангентору прилагается комплект из 4 струевых насадок разного диаметра. Дополнительно можно заказать щелевую и/или дождевую и/или вакуумную насадку.



## Система подводного гидро-вакуумного массажа

### Технические характеристики: насадка для подводного гидро-вакуумного массажа

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Габаритные размеры (ДхВ), мм | 105±3 x 75±2 |
| Внешний диаметр, мм          | 70±2         |
| Внутренний диаметр под шланг | 1/2"         |
| Масса, кг                    | 0,3          |

### Технические характеристики: шланг для подводного гидро-вакуумного массажа

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Длина шланга, мм                           | 3000±80 |
| Диаметр со стороны подключения к муфте, мм | 44±1    |
| Внутренний диаметр шланга, мм              | 12±1    |
| Масса, кг                                  | 1,5     |

## Устройство для подводного душ-массажа «Аквазир» (тангентор)

### Технические характеристики

|                                                                                       |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм                                                        | 850x400x900                                   |
| Масса, кг                                                                             | 50                                            |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт                                                | 1270                                          |
| Уровень шума, дБА                                                                     | 60                                            |
| Отклонение показаний встроенного манометра от фактического давления в шланге ПДМ, бар | ± 0,1                                         |
| Давление в шланге ПДМ, бар                                                            | от 1 до 5<br>(на насадке с меньшим диаметром) |
| Максимальная температура воды, С                                                      | 40                                            |
| Номинальное напряжение, В                                                             | 220-240                                       |

***Physiotecnica***

официальный представитель  
в Республике Казахстан  
**Golfstrim-Astana TOO**  
**+7 705 422 9437 +7 707 863 6882**  
**[www.golfstrimastana.kz](http://www.golfstrimastana.kz)**

